

AORTÁLNÍ **PUNCHE**





- **Punch 8 z** (20cm)
- kuželovitý konec, dlouhý
- rotační řez

- **Lanceta 8 z** (20cm)
- ostří 10 x 3,3 mm
- zatažitelný štít

PerfectCut®


Pokročilá sada nástrojů pro perfektní incizi aorty PerfectCut Aortální Lanceta.

- konzistentní, spolehlivé, opakovatelné křížové incize
- pro aortotomii jako je ta na koronární arteriální proximální anastomóze a oblasti arteriální kanylace
- ostří lancety je kryto zatažitelným štítem PerfectCut rotační punch s kuželovitým koncem
- punch využívá uniformní incize lancety ke snížení pravděpodobnosti vzniku postranních bočních zářezů způsobených nekonzistentní incizí ostřím skalpelu
- pokročilý kuželovitý konec je navržen pro přímý průnik – není nutná technika podobná u zapínání knoflíku
- akce rotačního řezu vyžaduje méně síly a eliminuje odstřihávání jemných tkání

KÓD	VELIKOST (PRŮMĚR)	DĚLKA LANCETY
RCK40	● + 4 mm	16,5 cm
RCK45	● + 4,5 mm	16,5 cm
RCK48	● + 4,8 mm	16,5 cm
RCK50	● + 5 mm	16,5 cm

KROK JEDNA:


aortální lanceta
vytváří precizní
křížovou incizi

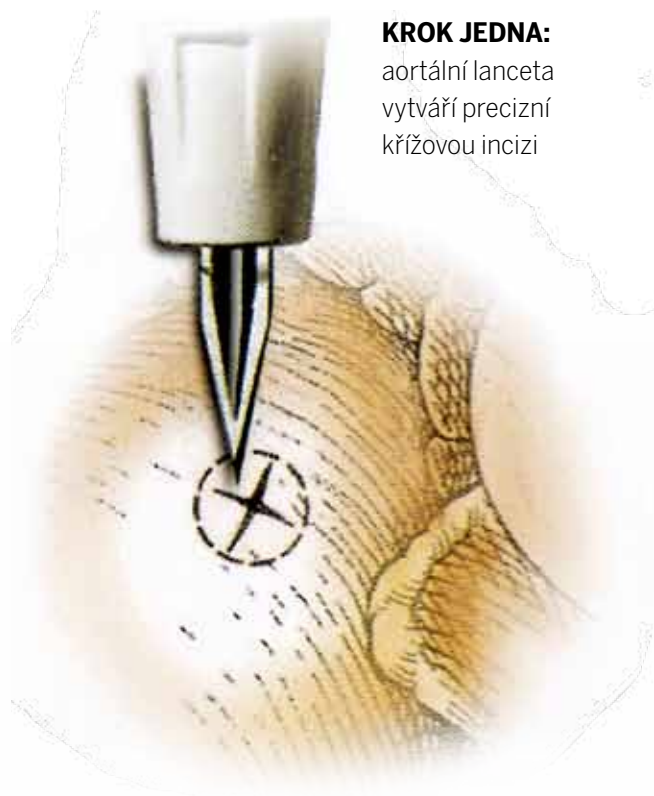

pevná, bytelná
konstrukce zajišťuje
spolehlivý výkon


KROK DVA:

kuželovitý konec
punchu prochází
jednoduše incizí

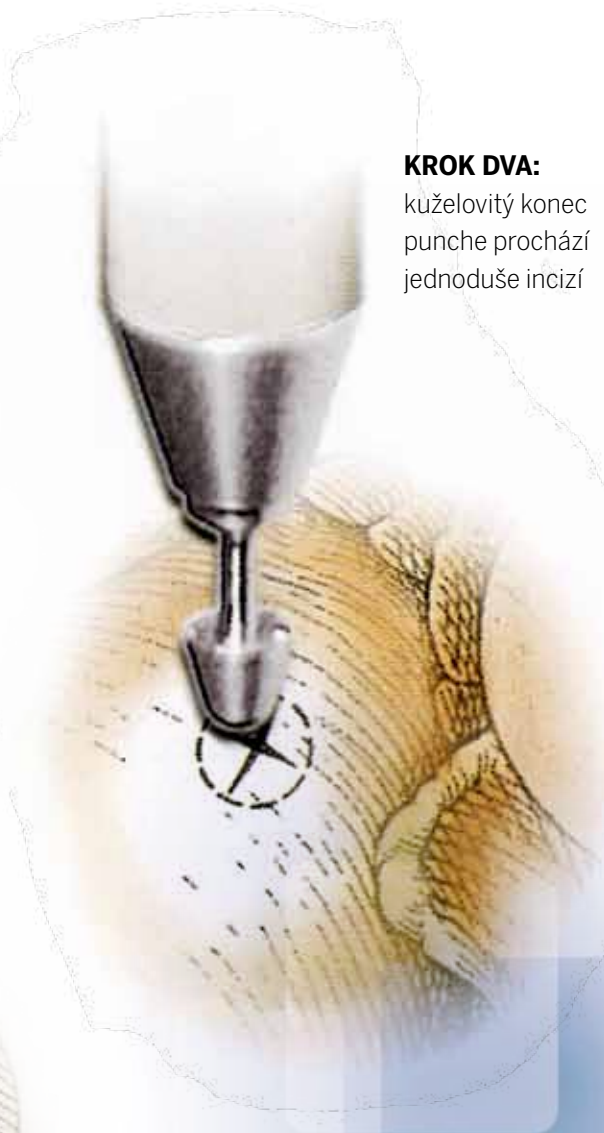

VÝSLEDEK:

perfektní aortotomie

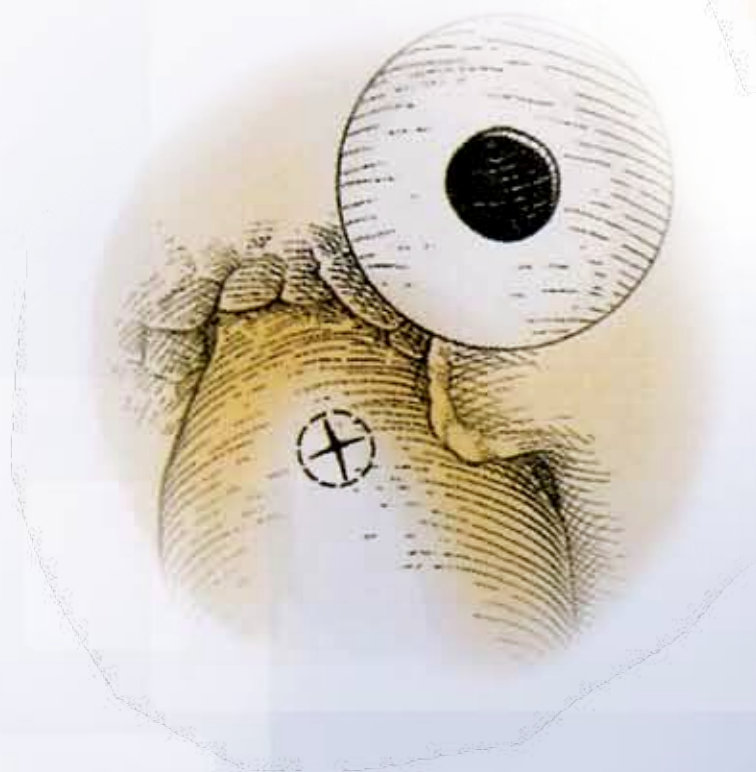



AORTÁLNÍ PUNCHE

CleanCut® & PerfectCut® série

Vytváří uniformní aortní vstupy
pro transplantaci cév.

- vytváří uniformní vstupy v oblasti anastomózy
- rotační řez vyžaduje méně síly
- automaticky se narovnávající mechanismus řezu
- šest velikostí a dvě délky pro široké spektrum chirurgických situací

MATERIÁLY

- chirurgická nerezová ocel
- termoplastická konstrukce

KÓD	VELIKOST (PRŮMĚR)	DÉLKA PUNCHE
RCL28	● 2,8 mm	20 cm
RCL35	● 3,5 mm	20 cm
RCL40	● 4 mm	20 cm
RCL45	● 4,5 mm	20 cm
RCL48	● 4,8 mm	20 cm
RCL50	● 5 mm	20 cm
RCC28	● 2,8 mm	17 cm
RCC35	● 3,5 mm	17 cm
RCC40	● 4 mm	17 cm
RCC45	● 4,5 mm	17 cm
RCC48	● 4,8 mm	17 cm
RCC50	● 5 mm	17 cm
RCB40	● 4 mm	20 cm
RCB45	● 4,5 mm	20 cm
RCB48	● 4,8 mm	20 cm
RCB50	● 5 mm	20 cm
ALX33 (Lancet)	✚ 3,3 mm	16,5 cm

CLEANCUT(RCC a RCL) PERFECTCUT(RCB)

Punche 6 jednotek/balení
Lanceta 25 jednotek/balení